

Portadent T



jörg&sohn

Portadent T

Le fauteuil portatif pour l'équipement dentaire.


- ◆ Ce fauteuil est établi en relation avec un appareil opératoire mobile, de préférence SIROBOY T de Siemens, pour le traitement dentaire dans régions éloignés et en tous lieux où un équipement stationnaire n'est peut pas installé.
- ◆ L'ajustage d'altitude de l'assise s'effectue à l'aide d'un ressort à gaz avec un cric à parallélogramme articulé.
- ◆ Le réglage d'inclinaison de l'assise et le réglage du dossier s'effectuent synchroniquement à l'aide d'un ressort à gaz.
- ◆ Le repose-tête avec coussin cunéiforme se laisse arracher et fixer à action progressive.
- ◆ Le sommier rembourré en une pièce est fixé avec ruban auto-accrochant.
- ◆ Les pieds d'appui extensibles et une vis de niveau garantit la position fortifiée du fauteuil.
- ◆ On peut installer au fauteuil une cuvette en acier inox avec réservoir ainsi qu'une lampe à halogène.
- ◆ On doit replier le fauteuil pour le transport et le caser avec la cuvette et la lampe à halogène dans le caisse de transport en aluminium.

Données techniques :

Ajustage d'altitude :	360 – 740 mm
Dimensions du caisse de transport :	environ 80 x 60 x 61 cm
Poids avec le caisse de transport :	environ 50 kg
Raccordement au secteur (lampe) :	230V 50/60 Hz 110V 60 Hz
Consommation électrique avec 230V :	0,16 A
avec 110V :	0,3A
Lampe à incandescence :	12V – 20 watt

Sauf modifications techniques!

Fauteuil numéro 6140-00-00-croquis coté

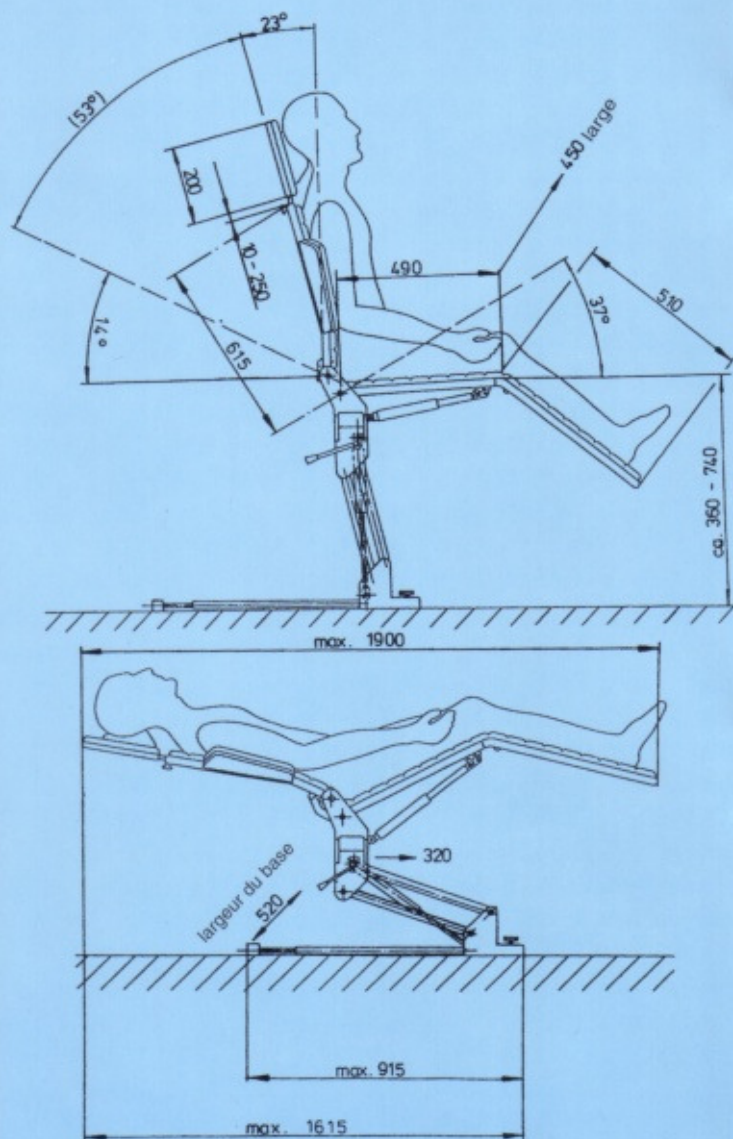

Ce produit est énuméré à l'OTAN:
NATO-STOCK-NO : 6520-66-135-1552



Possibilités de livraison :

Le fauteuil Portadent T complet avec cuvette, lampe à halogène 230V, 50/60 Hz et aluminium caisse de transport.

Numéro de commande : 6140-00-00

Le fauteuil Portadent T complet avec cuvette, lampe à halogène 110V, 60 Hz et aluminium caisse de transport.

Numéro de commande : 6140-00-01

Le fauteuil Portadent T seulement avec caisse de transport.

Numéro de commande : 6140-00-02

Cuvette avec réservoir et adapter.

Numéro de commande : 6140-30-20

Lampe à halogène 230V, 50/60 Hz avec adapter.

Numéro de commande : 6140-30-14


Lampe à halogène 110V, 60 Hz avec adapter.


Numéro de commande : 6140-30-15


 Portadent T



jörg&sohn

 Equipements
dentaires

 Equipements médicaux

 Podologie
médicale